


ALC アップローダー アップデート方法



最新バージョンがリリースされると「Alc_up」のアイコンに「！」印とポップアップが表示されます。

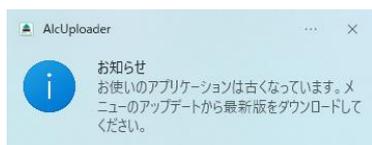

※ポップアップはお使いの PC の設定により表示されない場合がございます。


アップデート方法




1. タスクバーにある「隠されたインジケーターを表示します」ボタンをクリックします。



2. 隠されたインジケーターの中から「Alc_up」にカーソルを合わせ右クリックします。

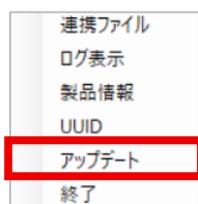

3. メニューの中から「アップデート」をクリックします。

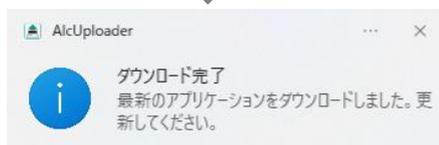


4. ダウンロード完了通知がポップアップされます。


※ダウンロード完了後は、メニューから「終了」を選択し、アップローダーを終了してください※




5. C:\Users\Public\Downloads に「AlcUploaderSetup.msi」がダウンロードされます。ダウンロードした「AlcUploaderSetup.msi」をダブルクリックし、セットアップを開始します。

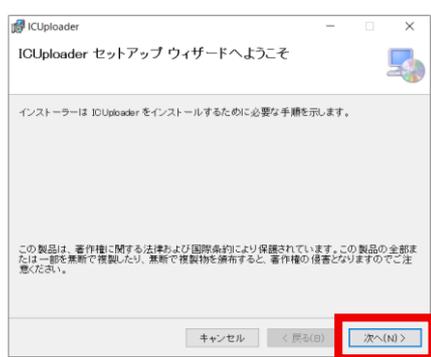

6. アップローダーのセットアップ画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックします。

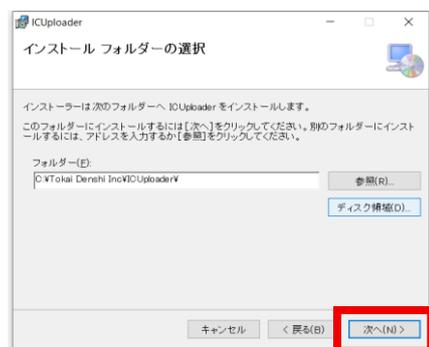


7. インストール先フォルダの選択画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックします。
※ファイル選択の必要はございません。

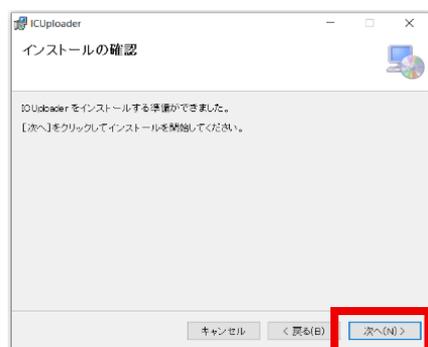

8. インストールする準備が整いました。「次へ」ボタンをクリックするとインストールが始まります。



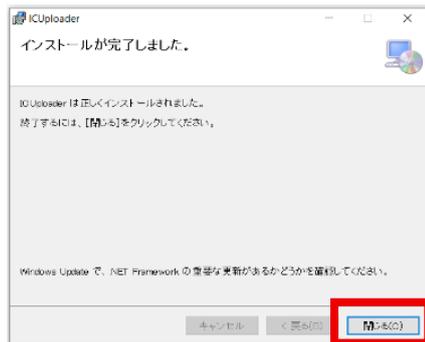

9. インストールが完了すると、確認画面が表示されます。「閉じる」ボタンをクリックし、ウィンドウを閉じます。

※更新後は自動起動されます※

※以下の表示があれば最新バージョンにアップデートされています。



※「Alc_up」のアイコンに「」印がある場合はメンテナンス中の可能性があります。



東海電子株式会社 コンタクトセンター

TEL : 0120-609-100

(受付時間 平日 9:00~17:30)